

# Meri Spray +

Actif sur  
**Salmonelles  
et Listeria**  
En 5 minutes

DÉTERGENT - DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES  
**PRÊT À L'EMPLOI**



**EFFICACITÉ, RAPIDITÉ, SIMPLICITÉ**

Pour le Nettoyage – Désinfection de tous types  
de surfaces : Tables, mobiliers, sanitaires,  
plan de travail de cuisine, matériels et locaux de soins médicaux,  
cliniques vétérinaires, etc.

**Élimine  
99.99%**

des Bactéries,  
Levures,  
Moisissures,  
Virus



**ADAPTÉ À UN USAGE FRÉQUENT**






## DÉTERGENT - DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES PRÊT À L'EMPLOI

**Meri Spray +** est un puissant détergent désinfectant Bactéricide, Levuricide, Fongicide et Virucide  
**Meri Spray +** est spécialement conçu pour la désinfection sur tous types de surfaces.

- Usage général (TP2): Tables et plans de travail, Sanitaires, poignées de portes, matériels divers,...
- Usage au contact des surfaces alimentaires (TP4): Cuisines, Tables de préparation des aliments...
- Usage dans le domaine médical (TP2): matériel médical, lieux de soins, cliniques vétérinaires,...


### DOSES ET MODE D'APPLICATION

- Pulvériser Meri Spray + à raison de 6ml/m<sup>2</sup> (2 à 3 pressions).
- Laisser agir 1 à 15 minutes selon l'effet recherché et le domaine d'application (voir tableau)
- Ne pas rincer sauf en cas d'application sur les surfaces en contact avec les aliments (rinçage à l'eau potable obligatoire)
- Bien insister sur les recoins et les surfaces difficiles d'accès
- Il est conseillé de faire un test sur la surface à traiter.

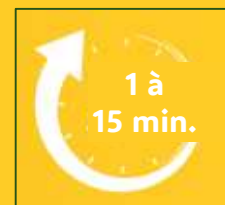

#### Caractéristiques

pH : 10.5  
Densité : 1.0

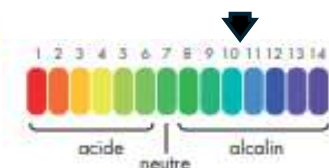

**Composition :** Liquide prêt à l'emploi contenant en % massique  
Chlorure d'Alkyl Diméthyl Benzyl Ammonium (CAS 68424-85-1) : 0.5%  
Chlorure de Didécyl Diméthyl Ammonium (CAS 7173-51-5) : 0.5%

**Présentation :** Flacon pulvérisateur de 750 ml

**Conservation :** Stable 24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la chaleur et du gel

#### Précautions d'emploi :

Meri Spray + est un produit biocide. Utilisez les biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Il est conseillé de faire un test préalable sur la surface à traiter.

| Tableau Efficacité                                                                                                                                                  | Norme à 20°C        | conditions | temps de contact |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| TP2 général et TP4 surfaces alimentaires                                                                                                                            |                     |            |                  |
| <b>Bactéries</b> : <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i>                               | EN 1276 et EN 13697 | Saleté     | 1 min            |
| <b>Levures</b> : <i>Candida albicans</i>                                                                                                                            | EN 1650 et EN 13697 | Saleté     | 1 min            |
| <b>Fongi</b> : <i>Aspergillus brasiliensis</i>                                                                                                                      | EN 1650 et EN 13697 | Saleté     | 15 min           |
| <b>Virus</b> : Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Norovirus murin, Vaccinia virus                                                                                | EN 14476            | propreté   | 15 min           |
| TP2 domaine médical                                                                                                                                                 |                     |            |                  |
| <b>Bactéries</b> : <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus faecium</i> | EN 13727 et 17387   | Saleté     | 5 min            |
| <b>Levures</b> : <i>Candida albicans</i>                                                                                                                            | EN 13624 et 17387   | Saleté     | 5 min            |
| <b>Fongi</b> : <i>Aspergillus brasiliensis</i>                                                                                                                      | EN 13624 et 16615   | Saleté     | 15 min           |



Huvepharma SA - 12 rue de Malacussy - 42100 Saint-Etienne - France  
Tel : +33(0)477 81 00 85 ou +33(0)241 92 11 11 - Email: [info.france.hygiene@huvepharma.com](mailto:info.france.hygiene@huvepharma.com)  
Pour plus d'informations consultez [www.labomerial.fr](http://www.labomerial.fr)